



# CENTRA-LINE™

Центральные венозные катеры

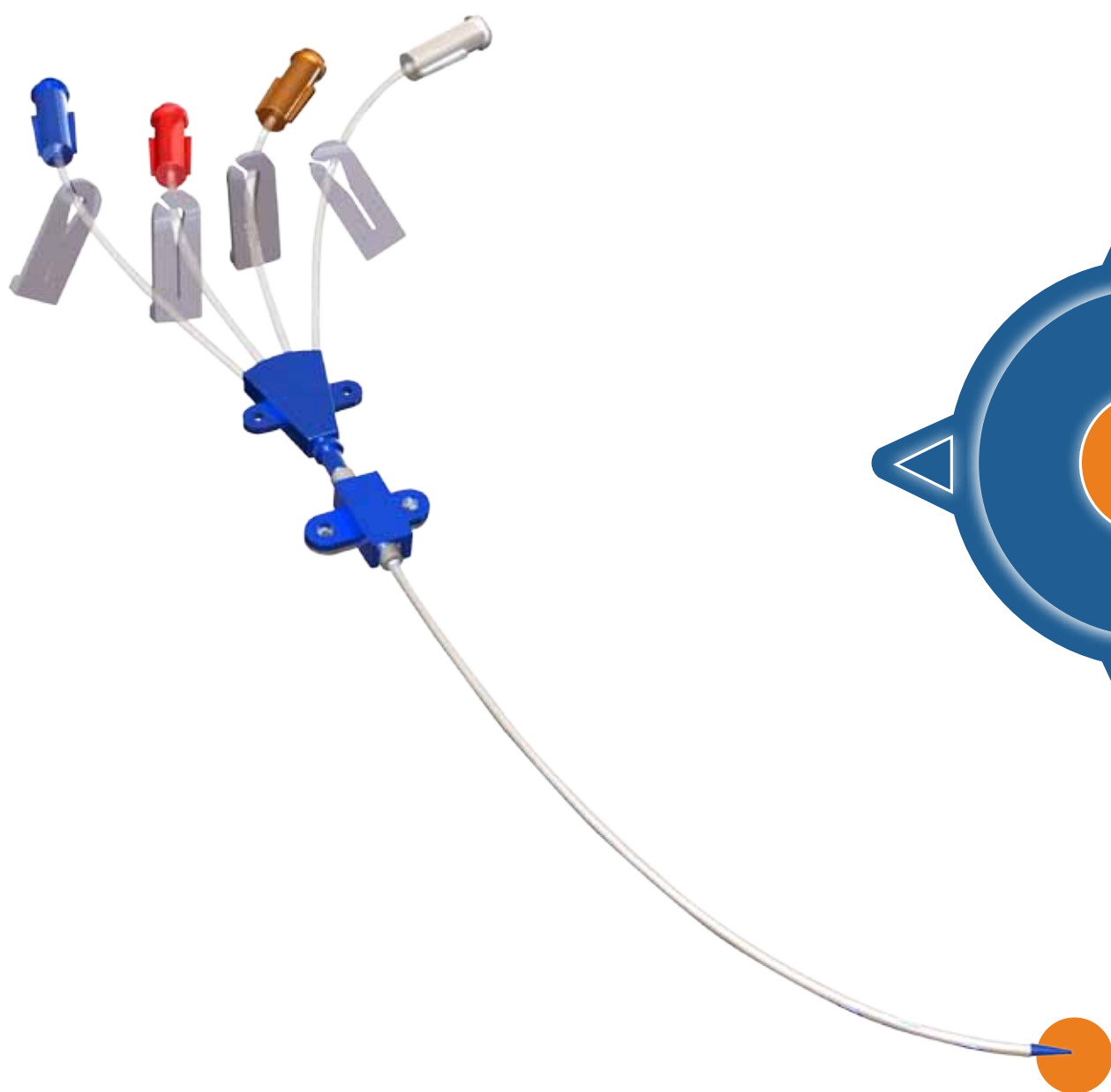

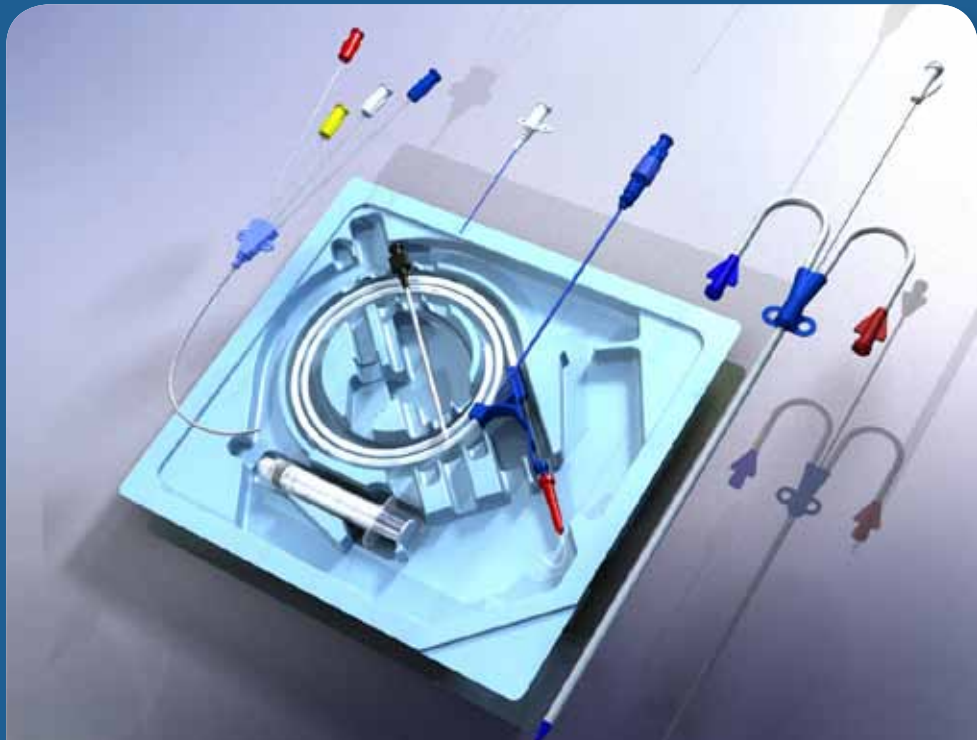

### Изготовление наборов с ЦВК на заказ

Компания Biometrix может изготовить центральные венозные катетеры в наборе в соответствии с техническими условиями заказчика. Наборы могут включать пеленки для обкладывания области манипуляции, перчатки, марлевые шарики, марлевые салфетки, иглы для подкожной инъекции, контейнеры для игл.



CLC2000 — безыгольный клапан, обеспечивающий положительное давление в просвете катетера.

CLC2000 представляет собой подключаемый к катетеру коннектор уникальной конструкции. После того как от CLC2000 отсоединяют шприц или соединительную трубку, в просвет катетера впрыскивается некоторое количество раствора, что препятствует попаданию крови в просвет катетера и последующему тромбообразованию.



# CENTRA-LINE™


## Центральные венозные катетеры

Компания Biometrix предлагает широкий спектр наборов для катетеризации центральных вен.

Центральные венозные катетеры Biometrix — безопасные и надежные изделия, предназначенные для различных видов инфузионной терапии.

Многопросветные катетеры позволяют проводить несколько процедур одновременно через единственную точку сосудистого доступа:

- Мониторинг ЦВД
- Взятие образцов крови для анализа
- Одновременная инфузия несовместимых лекарственных препаратов
- Переливание компонентов крови
- Полное парентеральное питание

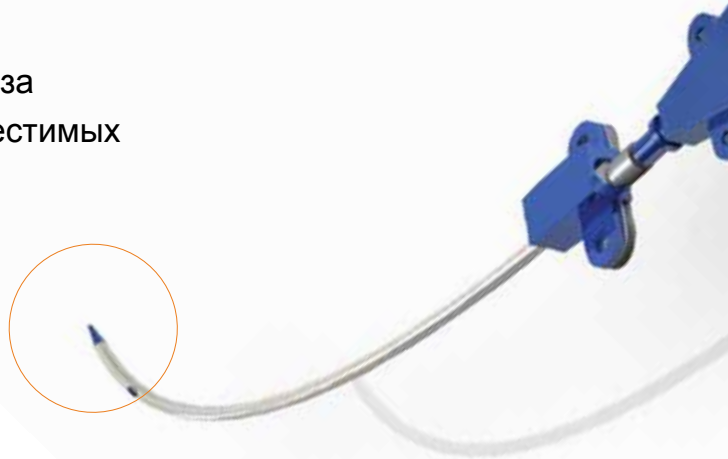



### Y-образная игла

Y-образная игла-интродьюсер для проводника обеспечивает доступ к вене без отсоединения шприца от иглы. В Y-образную иглу встроен направляющий клапан, который предотвращает потерю крови и эмболию во время пункции центральной вены и введения проводника.



### Центральный венозный катетер для быстрой инфузии

Центральный венозный катетер для быстрой инфузии обеспечивает высокую скорость переливания инфузионных растворов и препаратов крови. Набор скомпонован таким образом, чтобы катетер можно было установить быстро. Применяется в экстренных случаях при травме, оказании неотложной помощи, в операционной.

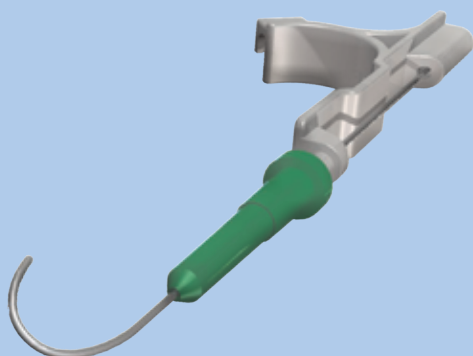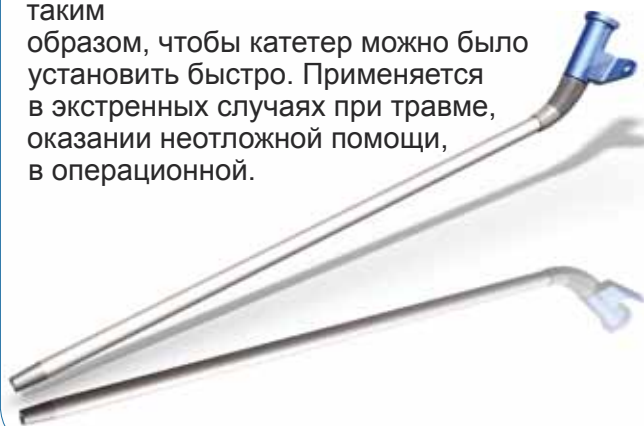

### Проводник, устойчивый к перегибам

Проводник Biometrix способен изгибаться под острым углом, не запутываясь и не образуя петель. Эта особенность значительно облегчает проведение центрального венозного катетера.

# 4

## ЧЕТЫРЕХПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Код	Описание	Y-образная игла	CLC-2000*
HH-8515	8.5Fr x 15cm	-	-
HH-8516*	8.5Fr x 15cm	-	-
HH-8520	8.5Fr x 20cm	-	-
HH-8521*	8.5Fr x 20cm	-	-
HH-8530	8.5Fr x 30cm	-	-
HH-18515	8.5Fr x 15cm	+	-
HH-18520	8.5Fr x 20cm	+	-
HH-18530	8.5Fr x 30cm	+	-
HH-E8515	8.5Fr x 15cm	+	+
HH-E8516*	8.5Fr x 15cm	+	+
HH-E8520	8.5Fr x 20cm	+	+
HH-E8521*	8.5Fr x 20cm	+	+
HH-E8530	8.5Fr x 30cm	+	+

\*Содержат специальные изломоустойчивый Проводник

# 2

## ДУХПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Код	Описание	Y-образная игла	CLC-2000*
HK-7015	7Fr x 15cm	-	-
HK-7016*	7Fr x 15cm	-	-
HK-7020	7Fr x 20cm	-	-
HK-7021*	7Fr x 20cm	-	-
HK-7030	7Fr x 30cm	-	-
HK-X7015	7.5Fr x 15cm	-	-
HK-X7020	7.5Fr x 20cm	-	-
HK-X7030	7.5Fr x 30cm	-	-
HK-I7015	7.5Fr x 15cm	+	-
HK-I7020	7.5Fr x 20cm	+	-
HK-I7030	7.5Fr x 30cm	+	-
HK-E7015	7.5Fr x 15cm	+	+
HK-E7016*	7.5Fr x 15cm	+	+
HK-E7020	7.5Fr x 15cm	+	+
HK-E7021*	7.5Fr x 15cm	+	+
HK-E7030	7.5Fr x 30cm	+	+

# 3

## ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Код	Описание	CLC-2000*
HJ-5008	5.5Fr x 8cm	-
HJ-5013	5.5Fr x 13cm	-
HJ-5030	5.5Fr x 30cm	-
HJ-E5008	5.5Fr x 8cm	+
HJ-E5013	5.5Fr x 13cm	+
HJ-E5030	5.5Fr x 30cm	+

# 2

## ДУХПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Код	Описание	CLC-2000*
HK-4005	4Fr x 5cm	-
HK-4008	4Fr x 8cm	-
HK-4013	4Fr x 13cm	-
HK-4030	4Fr x 30cm	-
HK-5006	5Fr x 6cm	-
HK-5008	5Fr x 8cm	-
HK-5013	5Fr x 13cm	-
HK-5020	5Fr x 20cm	-
HK-E4005	4Fr x 5cm	+
HK-E4008	4Fr x 8cm	+
HK-E4013	4Fr x 13cm	+
HK-E5006	5Fr x 6cm	+
HK-E5008	5Fr x 8cm	+
HK-E5013	5Fr x 13cm	+

# 3

## ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Код	Описание	Y-образная игла	CLC-2000*
HJ-7015	7Fr x 15cm	-	-
HJ-7016*	7Fr x 15cm	-	-
HJ-7020	7Fr x 20cm	-	-
HJ-7021*	7Fr x 20cm	-	-
HJ-7030	7Fr x 30cm	-	-
HJ-X7015	7.5Fr x 15cm	-	-
HJ-X7020	7.5Fr x 20cm	-	-
HJ-X7030	7.5Fr x 30cm	-	-
HJ-I7015	7.5Fr x 15cm	+	-
HJ-I7020	7.5Fr x 20cm	+	-
HJ-I7030	7.5Fr x 30cm	+	-
HJ-E7015	7.5Fr x 15cm	+	+
HJ-E7016*	7.5Fr x 15cm	+	+
HJ-E7020	7.5Fr x 20cm	+	+
HJ-E7021*	7.5Fr x 20cm	+	+
HJ-E7030	7.5Fr x 30cm	+	+
HJ-E7031*	7.5Fr x 30cm	+	+

\*Содержат специальные изломоустойчивый Проводник

# 1

## ОДНОПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Код	Описание	Y-образная игла	CLC-2000*
HO-4015	14Ga x 15cm	-	-
HO-4020	14Ga x 20cm	-	-
HO-4030	14Ga x 30cm	-	-
HO-6015	16Ga x 15cm	-	-
HO-6020	16Ga x 20cm	-	-
HO-6030	16Ga x 30cm	-	-
HO-I4015	14Ga x 15cm	+	-
HO-I4020	14Ga x 20cm	+	-
HO-I4030	14Ga x 30cm	+	-
HO-I6015	16Ga x 15cm	+	-
HO-I6020	16Ga x 20cm	+	-
HO-I6030	16Ga x 30cm	+	-
HO-E4015	14Ga x 15cm	+	+
HO-E4020	14Ga x 20cm	+	+
HO-E4030	14Ga x 30cm	+	+
HO-E6015	16Ga x 15cm	+	+
HO-E6020	16Ga x 20cm	+	+
HO-E6030	16Ga x 30cm	+	+
HO-8015	18Ga x 15cm	-	-
HO-8020	18Ga x 20cm	-	-

# 1

## ОДНОПРОСВЕТНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Код	Описание
HO-9010	20Ga x 10cm
HO-9013	20Ga x 13cm
HO-9015	20Ga x 15cm
HO-9020	20Ga x 20cm
HO-7008	24Ga x 8cm
HO-7015	24Ga x 15cm
HO-7020	24Ga x 20cm

# 1

## КАТЕТЕР ДЛЯ БЫСТРОЙ ИНФУЗИИ

Код	Описание
JDX-4062	Катетер для быстрой инфузии 8 Fr
JC-7100	Trauma pack

### Содержимое лотка с набором:

- Рентгеноконтрастный полиуретановый катетер
- Проводник
- И игла-интродьюсер
- Шприц 5 мл
- Дилататор
- Заглушка под гепаринизированный раствор
- Скальпель

Количество в коробке: 20  
Количество в коробке: 10





## BIOMETRIX

Paardeweide 36 P.O.B. 7191  
4800 GD Breda, The Netherlands  
Tel: 31-76-5422720 | Fax: 31-76-5422716  
sales@biometrixmedical.com  
www.biometrixmedical.com

